



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Меры предосторожности

- Перед первым применением устройства внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией
- Используйте данный массажер для ног исключительно в соответствии с инструкцией.
- Отключайте устройство от электросети после использования и перед его очисткой.
- Используйте функцию подогрева с осторожностью. Не используйте ее на участках тела с онемением, излишней чувствительностью или с нарушениями кровообращения.
- Не допускайте использование устройства без присмотра детьми или лицами с ограниченными физическими возможностями и нарушениями психики.
- Не кладите устройство под подушку, одеяло или на кровать, это может создать риск возгорания, удара электрическим током или получения другой травмы по причине перегрева.
- Не накрывайте устройство при его использовании, избегайте повреждения мотора по причине его перегрева.
- Немедленно прекратите использование устройства при возникновении плохого самочувствия.
- Не используйте устройство при следующих обстоятельствах: неисправность, повреждение в результате падения на землю или в воду. Не используйте устройство, если шнур поврежден или запутан.
- Не используйте комплектующие части, не разрешенные производителем.
- Не вставляйте и не бросайте какие-либо предметы в отверстия массажёра.
- Не касайтесь устройства или вилки мокрыми руками.
- Избегайте контакта вилки или устройства с водой или другой жидкостью.
- Для отключения устройства используйте кнопку ПИТАНИЕ (POWER), а затем отключите его от источника питания.

2. Информация по электробезопасности

- Поместите устройство в безопасное место.
- Не размещайте и не храните устройство в местах, откуда оно может упасть в воду.

- Чтобы достать устройство, которое упало в воду, немедленно отключите его от источника питания.
- Не используйте устройство при принятии ванны или в душе. Не используйте его в слишком влажных или пыльных местах.
- Не используйте устройство в местах, где температура превышает 40°C.
- Не используйте его вне помещения.
- Не используйте его вблизи электрических плит, нагревателей или под прямыми солнечными лучами.
- Не садитесь на устройство.

3. Меры по охране здоровья

Если нижеперечисленное касается Вас, обратитесь к Вашему врачу перед использованием настоящего устройства:

- Если Вы страдаете от гипертонии, стенокардии, церебрального атеросклероза, церебрального тромбоза, рака, остеопороза или другой интенсивной или умеренной боли.
- Если у Вас установлен кардиостимулятор или другое медицинское устройство.
- Если Вы беременны.
- Если Вы испытываете боль, у Вас появляются отеки или иные негативные реакции в результате использования устройства, прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом.
- Устройство НЕ рекомендуется использовать лицам, больным диабетом.

4. Прочие меры предосторожности

- Не засыпайте при использовании устройства.
- Не используйте устройство под воздействием алкоголя или каких-либо наркотиков.
- Используйте устройство только для ног; не применяйте его для рук, локтей, коленей, грудной клетки или живота.
- Не используйте устройство более 30 минут.
- Не используйте устройство, если тканевые вкладыши порвались.
- Не используйте устройство в течение часа до и после еды.
- Не используйте функцию нагрева при низкой температуре. Если устройство находится в очень холодном помещении, и Вы переносите его в более теплое помещение, подождите как минимум один час перед тем, как использовать его, так как внутри может образоваться конденсат.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

5. Основные характеристики

- Современный дизайн
- Мобильность
- Функция роликового и разминающего массажа, а также наличие воздушных подушек для массажа давлением и функцию подогрева.
- Массаж всех частей стопы с использованием 2 автоматических программ длительностью 15 минут каждая.
- Регулируемая интенсивность с 3 уровнями.

6. Конструкция устройства

1. Корпус.
2. Зона расположения массажеров подъема стопы с функцией нагрева.
3. Зона массажных роликов.
4. Разминающий массаж (круговые движения) на пятках.
5. Расположение внутренних воздушных подушек.
6. Съёмная накладка из моющейся ткани в отверстиях для ног, с молнией.
7. Подключение с обратной стороны.

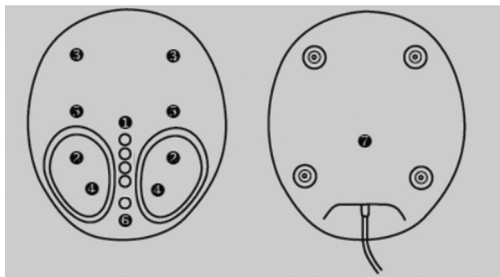

7. Функции

Кнопка ТАЙМЕР

Вы можете выставить таймер на время от 5 до 30 минут.

Кнопка РЕЖИМ

2 автоматических программы на выбор, обозначенные голубым и красным. Красный означает быстрый массаж от пятки до пальцев, а голубой – медленный массаж от пальцев до пятки. Если цвет красно-голубой, программа не активирована. Вы увидите, что по умолчанию установлена программа, обозначенная красным цветом. Нажмите кнопку, чтобы изменить программу.

Кнопка ИНТЕНСИВНОСТЬ

Регулирует интенсивность воздействия внутренних воздушных подушек, которые обеспечивают массаж давлением. Три степени интенсивности: голубой



цвет – низкая, голубой и красный – средняя и красный – высокая. При включении средняя степень интенсивности установлена по умолчанию. Нажмите кнопку, чтобы изменить степень интенсивности.

Кнопка НАГРЕВ

Эту функцию можно отключить, если Вы не хотите ее использовать. При включении массажера Вы увидите, что функция нагрева включается по умолчанию, и вокруг кнопки горит красный индикатор.

Кнопка ПИТАНИЕ (ВКЛ/ВЫКЛ.)

Кнопка включения и отключения устройства.

8. Перед включением устройства

- Убедитесь в том, что устройство находится в исправном состоянии.
- Установите его на пол, на ровную поверхность.

9. Использование устройства

- Подключите устройство к сети, убедившись в соответствии параметров электропитания – 220 В, 50 Вт.
- Поместите ноги в массажную зону.

ВАЖНО: Поместите ноги в отверстия для ног как можно глубже, убедитесь в правильном положении рефлекторных зон, чтобы избежать некомфортного давления на пальцы.

- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ один раз: загорится красный индикатор вокруг 3 кнопок (НАГРЕВ/РЕЖИМ/ПИТАНИЕ), и фиолетовый индикатор – вокруг четвертой кнопки (ИНТЕНСИВНОСТЬ).
- Нажмите кнопку НАГРЕВ один раз, если Вы ходите отключить функцию нагрева. Красный индикатор этой кнопки выключится.
- Нажмите кнопку ИНТЕНСИВНОСТЬ, если Вы хотите изменить степень интенсивности с низкого или среднего.
- Нажмите кнопку РЕЖИМ, если Вы хотите использовать другую автоматическую программу массажа.

10. Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не работает	1. Устройство не включено в сеть. 2. Кнопка ПИТАНИЕ находится в выключенном положении.	1. Включите устройство. 2. Нажмите кнопку ПИТАНИЕ один раз.
Устройство прекратило работу	1. Отключение электричества. 2. Устройство работало более 15 минут. 3. Перегрев по причине продолжительного использования. 4. Чрезмерное давление на ролики.	1. Проверьте электрическую сеть. 2. Отключите устройство и включите снова. 3. Отключите устройство и снова включите его после остывания. 4. Не допускайте слишком высокого давления на ролики.

11. Технические характеристики:

- Напряжение: 220 В
- Мощность: 40 Вт
- Время работы с автоматическим отключением: 15 минут
- Максимальный размер ноги: 45
- Частота сети: 50-60 Гц
- Температура эксплуатации: +5 +40 С°
- Относительная влажность: не более 80%
- Задекларировано в соответствии с требованиями ЕАС
- Размер (Длина*ширина*высота), см: 42 x 36 x 23
- Вес,кг: 3,30

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

ГАРАНТИЯ

- Компания «Императорский бутик» удостоверяет, что массажер для ног 3D Relax был произведен с соблюдением высочайшего контроля качества и был подвергнут самым строгим испытаниям для обеспечения наилучших характеристик работы и прочности.
- Настоящая гарантия распространяется на любые заводские дефекты или несоответствия, связанные с работой устройства в течение 12 месяцев с даты получения тренажера. Гарантия не распространяется на ущерб, возникший вследствие кражи, пожара или в результате несчастного случая, неправильной установки, преднамеренной или случайной халатности, а также несоблюдения инструкций данного руководства.
- Гарантия аннулируется и считается недействительной, если устройство подверглось несанкционированному ремонту и/или вскрытию.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Массажер электрический
Тип изделия	Бытовой
Модель изделия	Massager 3D Relax
Артикул	272904830
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	Джинхуа Ксингбу Текнолоджи Ко.,ЛТД
Адрес изготовителя	Провинция Жеджианг, город Джинхуа, округ Джиндонг, Ксиашун, населенный пункт Ксиадже, строение 1
Импортер	ООО «Императорский бутик»
Информация для связи	140961, а/я 211, г. Москва, ООО «Императорский бутик»
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Дата изготовления	Указана на упаковке

Производитель оставляет за собой право менять спецификации продукта без предварительного уведомления.

